



[www.floridaprobe.it](http://www.floridaprobe.it)



La sonda parodontale  
FLORIDA PROBE  
presenta notevoli  
vantaggi:

**FORZA COSTANTE**


questo assicura la  
certezza di effettuare  
esami comparabili  
nel tempo e  
indipendenti  
dall'operatore

**OPERATORI DIVERSI**

La forza costante di  
sondaggio conformata  
alle segnalazioni della  
S.I.D.P. (25gr) \*

consente di effettuare  
**FINALMENTE**  
sondaggi ripetitivi a  
distanza di tempo e  
con operatori diversi

\* (disponibile con  
forze tra 15 e 40gr.)

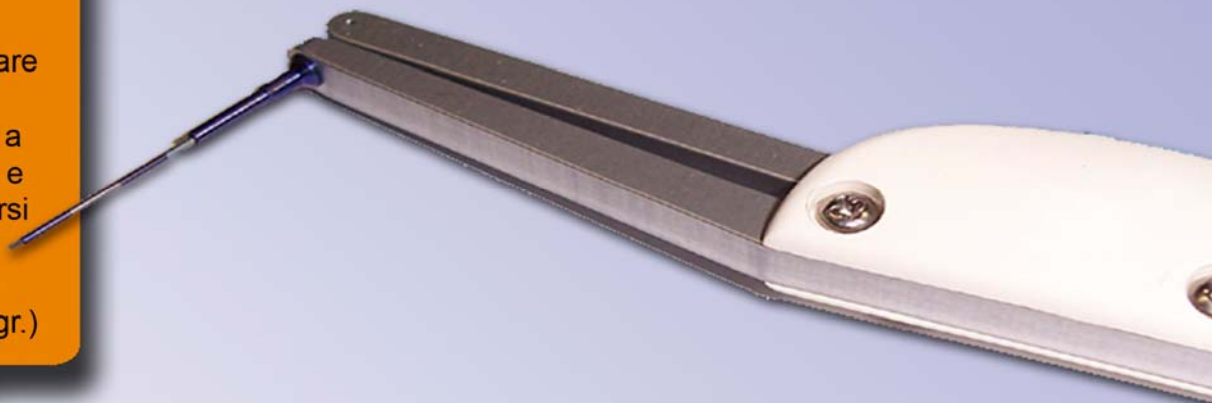


**SINGOLO OPERATORE**

Il pedale a 4 tasti  
permette di effettuare  
tutte le operazioni di  
gestione della cartella  
clinica senza dover  
interrompere l'esame  
clinico parodontale.

Grazie alla combinata  
manipolo / pedale  
l'operatore può lavorare  
in assoluta autonomia.



La registrazione dei dati viene effettuata con una sonda millimetrata che viene inserita nel sito da analizzare utilizzando la forza pressoria dell'operatore.

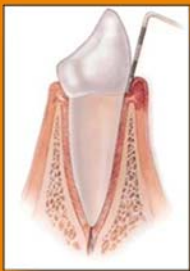

La compilazione della cartella cartacea richiede l'ausilio di un'assistente o la distrazione continua dell'attenzione dal cavo orale del paziente per cambiare strumento (dalla sonda parodontale alla penna)



La rappresentazione grafica dell'esame ed il relativo confronto deve essere effettuata manualmente con una notevole perdita di tempo e l'eventualità di errori.



L'archiviazione dei dati deve essere fatta manualmente con una notevole occupazione di tempo.



La sonda Florida Probe permette di effettuare rilevazioni direttamente al computer utilizzando una forza pressoria costante di 25 grammi, secondo le indicazioni S.I.D.P., indipendentemente dall'operatore.

La dotazione di 3 manipoli leggeri, autoclavabili ed un pedale a 4 tasti consentono, senza dover essere coadiuvati da altro personale e con la certezza di rilevare misurazioni altamente precise, di effettuare il sondaggio e registrare i dati.



La sonda, interfacciata al computer, consente di effettuare immediatamente grafici ed analisi comparative, monitoraggi statistici il tutto in maniera automatica.



L'archiviazione informatica, elimina completamente i tempi di archiviazione e consultazione delle cartelle.





a partire da ...